

Presentamos a continuación las instrucciones para recolectar y enviar muestras de sangre para FOUNDATION ACT®, para asegurar la realización exitosa del perfil genómico y detección de todas las clases de las posibles alteraciones genómicas.



Instrucciones para recolectar y enviar las muestras de sangre

1 ¡Use solamente los tubos enviados por FOUNDATION ACT®!

Otros tubos no se aceptarán.


2 Confirme si el líquido está claro y sin estar turbio y sin cristales.

3 Recolecte dos tubos de sangre total (8.5 ml por tubo).

- Evite el reflujo: los tubos contienen aditivos químicos y es importante evitar el reflujo para el paciente.
- Recoja especímenes por punción venosa de acuerdo al CLSI H3-A6.
- Llene los tubos completamente (8.5 mL por tubo).

4 Remueva el tubo del adaptador y mezcle inmediatamente revolviendo con pequeña inversión* por 8 a 10 veces. Mezclar en forma inadecuada o con atraso puede llevar a resultados imprecisos.

- Una inversión significa un giro de pulso de 180° y de vuelta (figura abajo).

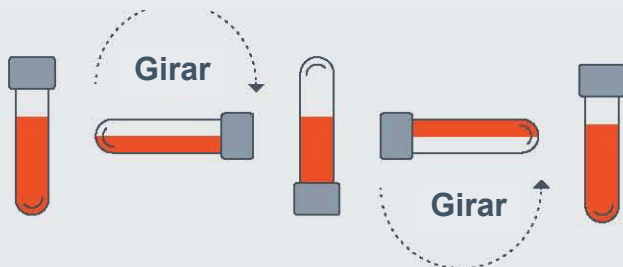

5 Documentos para enviar la muestra:

- Muestra de sangre: confirme que cada tubo esté etiquetado con las etiquetas enviadas por nosotros; fecha de recolección y 2 números identificadores únicos del paciente (rótulo incluido en el kit);
- Formulario de requisición rellenado (CRF) (acuérdesse de incluir el diagnóstico del paciente);
- Informes médicos disponibles; documentos que acompañan el Kit FOUNDATION ACT®;
- Copias de informes de patología y/u otra documentación clínica.

6 Despache la muestra preferencialmente el mismo día de recolección. No congelar ni refrigerar muestras de sangre.

La temperatura es importante. Mantenga la temperatura ambiente (6-37 ° C).

NO CONGELE.



CONCIERGE
FOUNDATION MEDICINE
0800 800 3640
argentina.foundation@roche.com



Para enviar material y más información sobre la prueba FoundationAct®, contáctese con nuestro CONCIERGE FOUNDATION MEDICINE



**FOUNDATION
MEDICINE®**

